

Manuale d'uso

Per la Configurazione da PC

HELPAMI GOLD



Indice

Capitolo 1 – Configurazione Iniziale.....	3
Configurazione.....	3
Password Amministratore.....	3
Capitolo 2 – Primo Avvio.....	4
Settaggio Password.....	4
Numeri d'Allarme.....	4
Numeri Rapidi.....	5
Capitolo 3 – Funzioni GPRS.....	5
Impostazioni GPRS.....	5
Capitolo 4 – Sveglia.....	6
Settaggio Sveglie.....	6
Capitolo 5 – ZONE.....	6
Impostazioni ZONE.....	6
Capitolo 6 – Health Care.....	7
Settaggio Valori.....	7
Capitolo 7 – Salvataggi e Reset.....	7
Salva e Carica File.....	7
Salva sul dispositivo.....	8
Resetta.....	9

Capitolo 1 Configurazione Iniziale

1.1 Configurazione

- 1)Aprire il vano posteriore ed inserire la SIM card.
- 2)Impostare lo Switch in ON per l'accensione del dispositivo.
- 3)Connettere al PC tramite la miniUSB.
- 4)Sul Desktop, tasto destro del mouse su "Computer">>>"Proprietà">>> "Gestione Dispositivi"
- 5)Cercare "Porte (COM e LPT)" dove troverete la porta "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge", per esempio:




Se il dispositivo non dovesse installarsi automaticamente, chiedere al supporto per i driver :
<http://supporto.skynetitalia.net/>

- 6)Aprire il software di configurazione "HELPAMI GOLD", selezionare la COM nel caso preso ad esempio COM5, e azionare "Open Com Port", aperta la COM azionare "Enter Setup Mode", la password di default è "000000" oppure inserire la vostra password amministratore e premere "OK".
- 7) Azionare "Sync PC Time" per sincronizzare l'orario del PC sul vostro dispositivo.
- 8) Azionare "Read Settings" per configurare il dispositivo sul vostro PC, premuto avrete i parametri del dispositivo riportati sul vostro PC, impostare quindi i parametri a vostro piacimento.
- 9) Finito la configurazione, premere "Save Settings" e questi verranno caricati sul dispositivo.
- 10) Per salvare i parametri su PC premere "Save Profile As".

NOTA: la porta mini USB serve per il collegamento col PC, per l'impostazione del dispositivo e per visualizzare il registro eventi, invece la porta USB è riservata per il collegamento di dispositivi esterni quali glucometro, bilancia, eccetera.

1.2 Password Amministratore

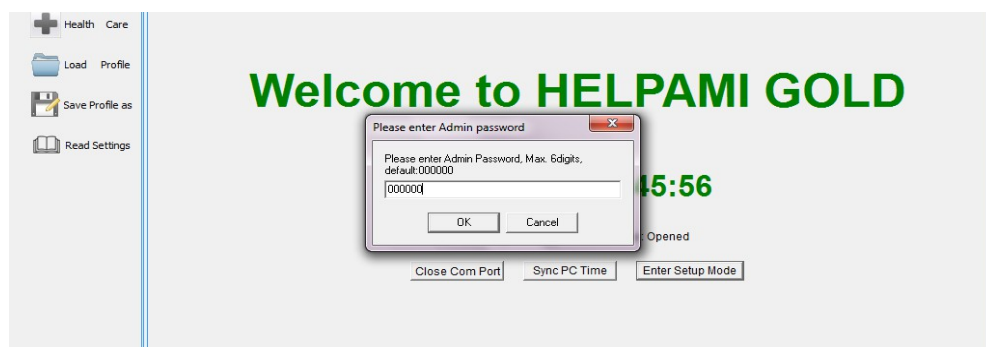

Capitolo 2 Primo avvio

2.1 Settaggio Password

Device ID:

Module IMEI:

Device Version: Remv1401

Enter New User Password: (4 Digits)

Re-enter New User Password:

Save

Enter New Admin Password: (6 Digits)

Re-enter New Admin Password:

Save

Old Simcard PIN Code:

New Simcard PIN Code:

Password utente per il controllo remoto

Password Amministratore per la configurazione da PC

Lasciare in bianco se non è impostato alcun PIN sulla SIM

2.2 Numeri d'Allarme

Device ID: è un codice personalizzabile a vostra disposizione per il riconoscimento del dispositivo

Basic Setting

Device ID: 34 T3 Simcard Number: ☒ Correction time by SMS automatically

When External DC Loss more than minutes then send SMS to Alarm Telephones.

Send Daily Report by SMS at Hour Minute


Serial Number	Alarm Receiver Telephone	Alarm Dial	Alarm SMS	Daily SMS	Threshold SMS	Threshold Dial	Threshold SMS	Armed DC Loss	Sensor Low Voltage	GPRS Fail SMS	Measured Values
Tel No. 1	00393456778455	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tel No. 2		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tel No. 3		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tel No. 4		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tel No. 5		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tel No. 6		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tel No. 7		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tel No. 8		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tel No. 9		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tel No. 10		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Impostare il numero della SIM utilizzata dal dispositivo in "HG Simcard Number"

Se non si dovessero ricevere i messaggi di allarme impostare prima del numero di telefono il prefisso del paese nel caso dell'Italia 0039

2.3 Numeri Rapidi

Impostare i 4 numeri rapidi legati ai 4 pulsanti sulla tastiera dell'Helpami GOLD, relativamente da sinistra verso destra.

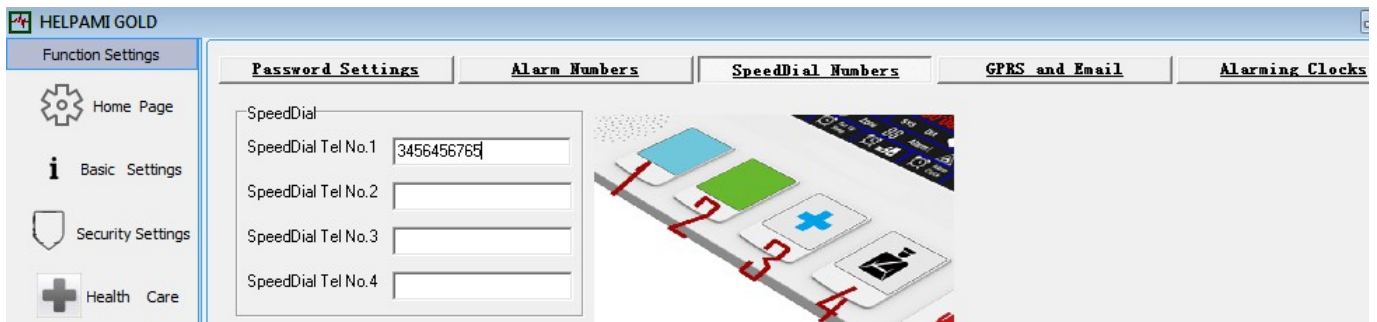

Capitolo 3 Funzioni GPRS

3.1 Impostazioni GPRS

The screenshot displays two configuration windows. The 'GPRS Settings' window on the left includes fields for Server IP/DNS 1 (183.12.162.69), Port 1 (5660), Server IP/DNS 2, Port 2, Resend Times (set to 1), GPRS APN (cmnet), Username, and Password. The 'Email Setting' window on the right includes fields for Email address 1 (info@KingPigeon.com.cn), Email address 2, SMTP Server (smtp.exmail.qq.com), Email Account (Mark@GsmAlarmSystem.com), and Email Password (king...). Below these are sections for 'Automatically send Emails time' with weekly and monthly schedules, and 'Upload daily report by GPRS at' with three timers. Blue annotations on the right side of the email settings point to the first email address as 'E-mail address for receiving data.' and the email account as 'E-mail account for sending data.'

“Server IP/DNS” e “Port” per ricevere i dati

Chiamare il proprio operatore mobile per conoscere il “GPRS APN”, “username” e “password” relativi alla SIM

Capitolo 4 Sveglia

4.1 Settaggio Sveglie

HELPAMI GOLD

Alarming Clocks

Alarming Clock	Type	Hour	Minute	Alert Times	Interval	Seconds
Alarming Clock 1	Normal	99	99	3	10	Seconds
Alarming Clock 2	Getup/Sleep	99	99	3	10	Seconds
Alarming Clock 3	Take Medic	99	99	3	10	Seconds
Alarming Clock 4	Normal	99	99	3	10	Seconds
Alarming Clock 5	Normal	99	99	3	10	Seconds

Capitolo 5 ZONE

5.1 Impostazioni ZONE

Security Settings

SMS DI ALLARME

Zone No.	Status	Zone Type	Zone Name	Alert times 20S/Time	Siren Sound 20S/Time	Monitoring Timer 1 Start	Monitoring Timer 1 End	Monitoring Timer 2 Start	Monitoring Timer 2 End
SOS Button	Disable	SOS Button	SOS Ask for Help	6	6				
01Zone	Disable	24Hours	Has not Get Up!	6	6				
02Zone	Disable	24Hours	Fall Down Alarm	6	6				
03Zone	Disable	24Hours	Fall Down Alarm	6	6				
04Zone	Disable	24Hours	Panic Help Alarm	6	6				
05Zone	Disable	24Hours	Emergency Alarm	6	6				
06Zone	Disable	24Hours	Gas Leakage Alarm	6	6				
07Zone	Disable	24Hours	Smoke Detector	6	6				
08Zone	Disable	24Hours	Water Leakage Alarm	6	6				
09Zone	Disable	Inner	Wireless Zone 0	6	6				
10Zone	Disable	Inner	Wireless Zone 1	6	6				
11Zone	Disable	Inner	Wireless Zone 1	6	6				
12Zone	Disable	Inner	Wireless Zone 1	6	6				
13Zone	Disable	Inner	Wireless Zone 1	6	6				

ZONA 00 fissa **PULSANTE SOS**

REMOTE CONTROL: per i telecomandi

ENTRANCE: sensori a cui verrà applicato il ritardo di ingresso ed entrata

INNER: sensori interni che non faranno scattare l'allarme in modalità parziale

OUTER: sensori perimetrali attivi subito sia in modalità parziale che in totale

DOOR BELL: sensori campanello

ONSITE: sensori che attivati in modalità parziale faranno suonare solo la sirena, in totale scatterà l'allarme

24hours: sensori attivi 24h , scatterà l'allarme anche in disarmo

BACKHOME: sensori che attivati mandano il dispositivo in modalità armato parziale

MONITORING: “watchdog” se il sensore non viene attivato dentro la finestra di tempo “start-end” il dispositivo andrà in allarme

Capitolo 6 Health Care

6.1 Settaggio Valori Health Care

After T3 Received Blood Pressure data, delay 3 minutes no any new data, will upload data to monitoring center over GPRS.
Temperature exceeds high threshold more than 5 minutes, send SMS to alarm numbers.
Temperature High Threshold 29 Degree, Temperature Low Threshold 16 Degree

	Unit	High Threshold	Low Threshold
Systolic	mmHg	143	58
Heart Rate	Time/Minute	90	50
Glucose	mmol/L	6.0	1.0
Weight	kg	0	0

1. Setting the threshold value so relative person can get alert SMS.
2. Glucose and Weight function for reserve only.

Capitolo 7 Salvataggi e Reset

7.1 Salva e Carica File

Armed Delay Time 0 S Entrance Delay Time 0 S ☐ Armed Disarm send SM ☐ Armed Disarm send GPI ☐ Alarm Start

Zone No.	Status	Zone Type	Zone Name	Alert times 20S/Time	Siren Sound 20S/Time	Monitoring Timer 1 Start	End	Times	Start	Mor
SOS Button	☐ Disable	SOS Button		Dis	Dis					
01Zone	☐ Disable	Remote Contr								
02Zone	☐ Disable	Remote Contr								
03Zone	☐ Disable	Remote Contr								
04Zone	☐ Dis									
05Zone	☐ Dis									
06Zone	☐ Dis									
07Zone	☐ Dis									
08Zone	☐ Dis									
09Zone	☐ Dis									
10Zone	☐ Dis									
11Zone	☐ Disable	Remote Contr								
12Zone	☐ Disable	Remote Contr								

File Explorer Window: Apri
Cerca in: Desktop
Raccolte
Cartella di sistema
Gruppo home
Cartella di sistema
green
Cartella di sistema
Nome file:
Tipo file: Bin
Apri
Annulla

Dopo aver personalizzato i vostri settaggi, premere “Save Profile as” per salvarli sul vostro PC, salvare il file in formato “.bin” , questo sarà il vostro file dei settaggi.


Potrete andare anche a recuperare e quindi caricare sull'interfaccia HELPAMI GOLD dei settaggi creati in precedenza, andando semplicemente a premere “Load Profile” e selezionando il file “.bin” con i vostri settaggi.

7.2 Salva sul dispositivo

Premere “Save Settings” per caricare i vostri settaggi e tutte le varie impostazioni sull'Helpami GOLD




Potrete visionare il processo sulla barra di scorrimento e ad avvenuto Caricamento visualizzerete il seguente messaggio “Save Successfull!”

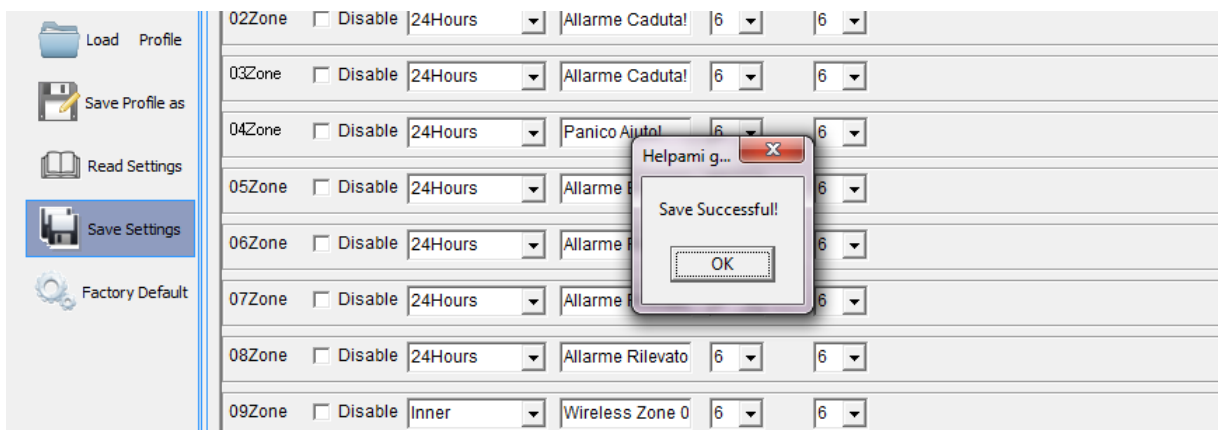


7.3 Reset

ATTENZIONE ANDANDO A PREMERE “Factory Default” ANDRETE A RESETTARE TUTTI I SETTAGGI SUL DISPOSITIVO HELPAMI GOLD , RIPORTANDOLI A QUELLI DI FABBRICA, MA NON QUELLI SULL'INTERFACCIA DEL PC

Vi basterà premere successivamente “Read Setting” e avrete anche sull'interfaccia PC le impostazioni di fabbrica appena caricate sul dispositivo

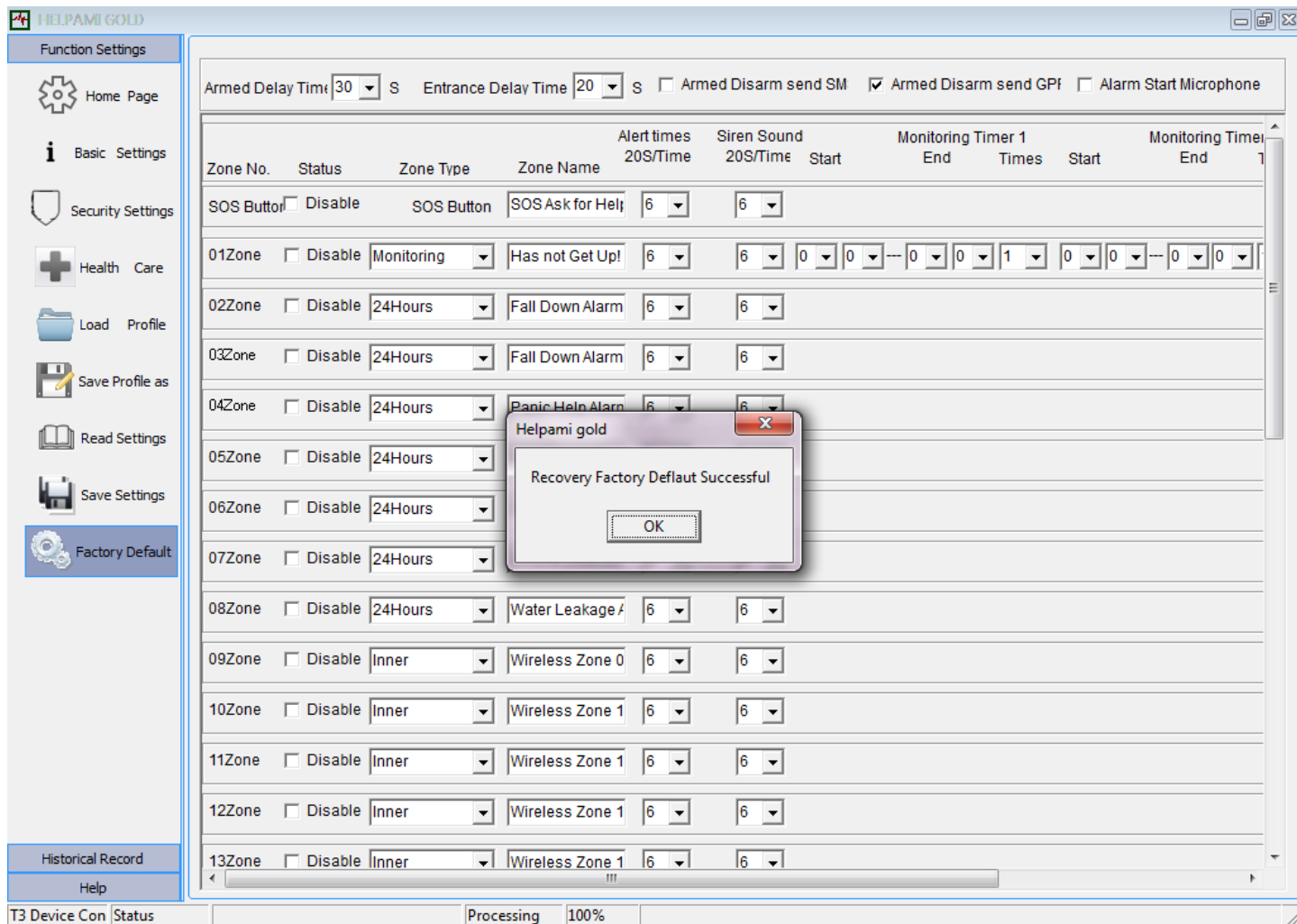

Historical Record

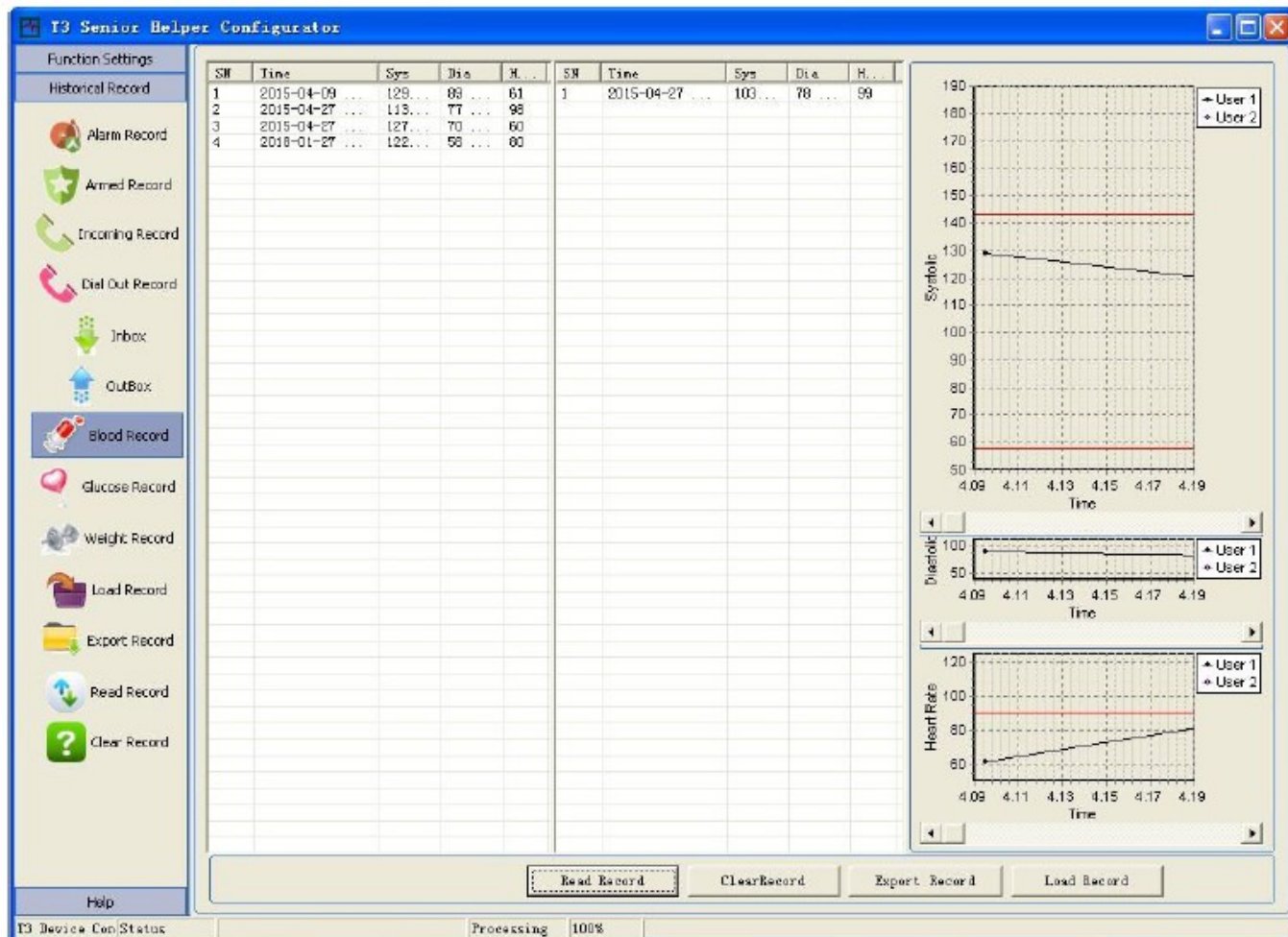

- ✓ **Alarm record:** Read the alarm records from T3 to the PC software.
- ✓ **Arm record:** Read the arm records from T3 to the PC software.
- ✓ **Incoming record:** Read the incoming call records from T3 to the PC software.
- ✓ **Dial Out record:** Read the dial out records from T3 to the PC software.
- ✓ **Inbox:** Read the inbox SMS.
- ✓ **Outbox:** Read the outbox SMS.
- ✓ **Dial Out record:** Read the dial out records from T3 to the PC software.
- ✓ **Blood record:** Read the Blood pressure records from T3 to the PC software.
- ✓ **Glucose record:** Reserve function.
- ✓ **Weight record:** Reserve function.
- ✓ **Load record:** Read the historical data profile from PC folder to the software.
- ✓ **Export record:** Export the historical data to the PC.
- ✓ **Read record:** Read all of the historical data from T3 to the software.
- ✓ **Clear record:** Click this button will **delete/erase all of the historical data on the T3 unit (Caution to use!)**